

Verfügbarmachen Ihres AEDs

Wir freuen uns, dass Sie darüber nachdenken, Ihren vorhandenen AED für Ersthelfer im Umkreis verfügbar zu machen. Im Zusammenspiel mit unserem Lebensretter-System machen Sie damit einen großen Bereich um den AED „herzsicher“. Es wird Ihnen nicht nur bereits mittelfristig einiges an Geld sparen, Sie haben auch einen Servicepartner an der Seite, der für Sie sicherstellt, dass der AED jederzeit einsatzbereit ist.

**nicht bloß eine Box,
sondern ein System.**

Wir unterstützen Sie umfassend

- ✔ Sie erhalten eine ausführliche Beratung per Telefon und E-Mail bei der Auswahl eines geeigneten Standortes.
- ✔ Sie bekommen eine Box zur Außenanbringung mit standardisierter Hinweistafel zugesandt.
- ✔ Zeigen Sie Ihr Logo mit einem Aufkleber auf der Hinweistafel, der Sie als Betreiber ausweist.¹
- ✔ Wenn Sie wünschen, versichern wir Ihren AED in unsere Defi-Versicherung für € 30,-/Jahr.
- ✔ Die Dokumentation im Medizinproduktebuch in einer DSGVO-konformen Cloud-Anwendung, jederzeit exportierbar, übernehmen wir für Sie.
- ✔ Auch die regelmäßige Sichtprüfung entfällt für Sie. Der AED meldet sich ab jetzt, wenn er etwas braucht bei Ihnen - und bei uns! Sie werden kontaktiert, um Ihnen das lästige Kümmern zu erleichtern, indem wir z.B. Ihnen schon das passende Verbrauchsmaterial mit Link zum Webshop mailen.
- ✔ Sie erlauben uns, Ihren AED in unserer DEFI-Map Datenbank anzulegen, sodass im Fall eines Herz-Kreislaufzustandes in der Nähe Ihres AEDs registriert Ersthelfer automatisiert zu Ihrem AED geführt werden und damit ein Leben retten können.
- ✔ Nach einem Einsatz melden wir uns bei Ihnen, um zu klären, ob der AED etwas benötigt, z.B. Verbrauchsmaterial oder Service und senden Ihnen das umgehend zu.
- ✔ Sie erhalten eine Spendenbescheinigung über Ihre zweckgebundene Zuwendung.
- ✔ Sollten Sie den AED irgendwann einmal nicht mehr selbst betreiben wollen, oder wird das Gerät alt, sind wir für Sie da. Dann setzen wir einen neuen AED ein und übernehmen den Standort gerne.

Gut zu wissen

Als Betreiber eines AEDs sind Sie von Gesetzes wegen Medizinproduktebetreiber und unterliegen entsprechend den Regelungen des MPBetrGesetzes. Dieses schreibt unter anderem vor, dass ein AED

- einmal im Jahr (spätestens alle zwei Jahre) einer sog. **Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK)** unterzogen werden muss. Dies erledigt i.d.R. ein externes Unternehmen kostenpflichtig.²
 - einer **regelmäßigen Sichtprüfung**³ unterzogen werden muss. Diese muss im **Medizinproduktebuch** (sozusagen das Servicebuch des AEDs) dokumentiert werden.
 - am Standort eindeutig mit vorgeschriebenen Rettungszeichen gekennzeichnet wird.
- ⚠ Viele moderne AEDs sind „wartungsfrei“ und herstellerseitig von der STK befreit. So lange der AED nur innerbetrieblich zugänglich ist, gilt auch für wartungsfreie Geräte die STK-Verpflichtung.
- i** Wenn Sie Ihren AED 24/7 öffentlich verfügbar installieren, entlässt Sie der Gesetzgeber aus der Verpflichtung zur STK. Über die entfallenden Kosten der STK holen Sie die Kosten für eine gut sichtbare Außenanbringung schnell wieder herein.⁴

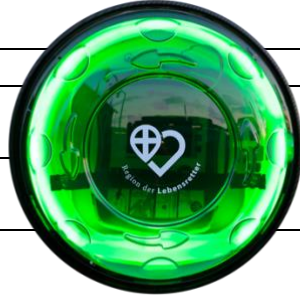
¹ Ab einer Menge von 10 Boxen designen wir die gesamte Hinweistafel komplett individuell für Sie.

² Wenn Sie wünschen, vermitteln wir Ihnen einen Servicepartner, der das zu fairen Konditionen anbietet.

³ Der Gesetzgeber definiert „regelmäßig“ nicht mit einem bestimmten Zeitraum. Es gibt aber Gerichtsurteile, die nahelegen, dass ein Zeitabstand von 14 Tagen noch in Ordnung ist, ein Abstand von vielen Wochen oder gar Monaten nicht.

⁴ Auch bei älteren, wartungsfreien AEDs ist es nicht falsch, die STK in regelmäßigen Abständen durchführen zu lassen.

Funktionen der Aufbewahrungsbox “Rotaid 24/7 Connected Cabinet”

Fernüberwachung des AEDs via SIM-Vertrag ⁵	<input checked="" type="checkbox"/>	
wetterfest IP56, bis -10°C, Nebel, Salz	<input checked="" type="checkbox"/>	
Deckel 5mm Polycarbonat, UV-stabilisiert, schlagfest IK10	<input checked="" type="checkbox"/>	
sicherer elektrischer Betrieb, 24V an der Box (230V am Trafo)	<input checked="" type="checkbox"/>	
automatisches Heizsystem, selbst-abschaltend, 24V	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stromverbrauch	ca. 150-160 kWh/Jahr	
Alarm beim Öffnen des Deckels	<input checked="" type="checkbox"/> Optionen: aus/85dB/95dB	
Lautstärke Alarm konfigurierbar	<input checked="" type="checkbox"/> (Cloud)	
Beleuchtung konfigurierbar	<input checked="" type="checkbox"/> (Cloud)	
leuchtet	grüne LEDs = geschlossen blinkende rote LEDs = offen/nicht korrekt geschlossener Deckel	
Information beim Öffnen	akustischer Alarm an der Box + <input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.	
Information beim Schließen	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.	
Information bei Entnahme AED	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.	
Information bei Rückgabe AED	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail nach 5 Sek.	
Information bei Störung AED	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ... Auf Ihren Wunsch wird unser Servicepartner automatisch tätig.	
Information bei Stromausfall an der Box	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ...	
Information bei Verbindungsproblemen der Box zur Cloud	<input checked="" type="checkbox"/> SMS und/oder E-Mail ...	
Datenausgabe für das Medizinproduktebuch	<input checked="" type="checkbox"/>	
Datenverarbeitung DSGVO-konform	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anforderungen der MDR ⁶ erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kosten/Folgekosten	Stromverbrauch s.o.	
Laufzeit für SIM-Überwachung	5 Jahre	



Unser Set-Preis: € 1.000,-

enthält: Aufbewahrungsbox, Hinweistafel + Aufkleber, SIM-Vertrag für 5 Jahre Fernüberwachung, umfassender Service (Preis incl. MwSt, gültig bis Ende 2025)

Optionen gegen Aufpreis:

- Montage der Box + Anfahrt (€ 300,-) ⁷
- Versicherung für den AED (€ 30,-/Jahr)

⁵ Der Vertrag kommt mit einem unserer Vertriebspartner zustande.

⁶ Medical Device Regulation (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Geltungsbeginn der Verordnung: 26. Mai 2021)

⁷ Voraussetzung dafür ist, dass eine Wand, Stele oder Säule zur Montage vorhanden, sowie Zugang zu 230V Strom unmittelbar am Installationsort ist (bzw. mittels Kabelkanal durch Wand erreichbar ist, dann im Gebäudeinneren Schuko-Steckdose in 1-2 m)

Wer soll wie benachrichtigt werden?

In Ihrem/r Betrieb/Verein/Gemeinde sollte mindestens ein/e Ansprechpartner/in informiert werden, wenn die Box nicht korrekt geschlossen ist, Verbrauchsmaterial abläuft, die Box einen Stromausfall anzeigt, etc.



Dieser QR-Code verweist auf unser Online-Formular (<https://wkf.ms/4gU1uGE>).

Wählen Sie dort für Push-Meldungen aus, wie die Benachrichtigungen für den/die Empfänger ausgelöst werden sollen: per SMS oder per Email.

Daten zum Einpflegen Ihres AEDs

- Unser Service für Sie: Aufgrund der SIM-Überwachung wird immer einer unserer Vertriebspartner benachrichtigt, wenn der AED entnommen/zurückgebracht wird und tritt dann zeitnah in Kontakt mit Ihnen, um sicherzustellen, dass der AED jederzeit einsatzbereit ist. Wir melden uns auch bei Ihnen, wenn die Elektroden bald ablaufen oder die Batterie turnusmäßig ausgetauscht werden sollte und bieten Ihnen die passenden Ersatzmaterialien für Ihr Modell und ggf. Service an.



Dieser QR-Code verweist auf unser Online-Formular (<https://wkf.ms/4hxbXZM>).
Melden Sie uns dort die zu hinterlegenden Daten zum AED wie z.B.

- Modell/Typ des AEDs
- AED Seriennummer
- Ablaufdatum der Klebeelektroden
- Batterie Ablaufdatum

Beratung



Unser Team berät Sie gerne bezüglich der konkreten Installation an der Fassade. Hier haben wir viel Erfahrung, auch mit schwierigen Installationsorten. Kommen Sie mit Fragen gerne auf uns zu, Ihr

Thomas Steuber

Tel. 0761-2160665-4
thomas.steuber@regionderlebensretter.de
aed@regionderlebensretter.de